

ULYS

LA PROTHÈSE D'ÉPAULE POUR FRACTURE



ET SON ENDO-ANCILLAIRE

 **CERAVER**
EXPERIENCE - INNOVATION

LA PROTHÈSE D'ÉPAULE POUR FRACTURE

L'IMPLANT ULYS

RÉDUCTION ET FIXATION OPTIMALES DES TUBÉROSITÉS

La prothèse ULYS pour fracture permet une réduction et une fixation optimale des tubérosités.

◆ **Métaphyse**

- > **Faible encombrement**
Permet une réduction optimale des tubérosités et autorise une autogreffe osseuse
- > **Bord médial et trous parfaitement lisses**
Évite la rupture des fils de cerclages tubérositaires
- > **Revêtement HAP**
Favorise l'ostéo-intégration métaphysaire

◆ **Tête**

- > **Ovoïde**
Reproduit l'anatomie et permet un contact optimal avec les tendons de la coiffe
- > **3 tailles**
Ø 39 épaisseur 15 mm
Ø 43 épaisseur 16 mm
Ø 47 épaisseur 18 mm

◆ **Tige**

- > **Cimentée à cannelures**
Assure un ancrage solide dans l'humérus fracturé
- > **Longueur 125 mm**
Assure la stabilité et l'auto-centrage
- > **Diamètre**
Existe en 6, 8, 10, 12 et 14 mm pour s'adapter à un maximum de dimensions
- > **Ø 8 mm longueur 200 mm**
Apporte une solution pour les fractures à propagation diaphysaire

LA GAMME

Tige Tête	Ø 6	Ø 8	Ø 10	Ø 12	Ø 14
T1	✓	✓	✓		
T2		✓	✓	✓	
T3		✓	✓	✓	✓

Acier inox selon ISO 5832-9



OPTIMISE LA TENSION DE LA COIFFE

SON ENDO-ANCILLAIRE


AJUSTEMENTS HAUTEUR ET RÉTROVERSION

L'endo-ancillaire ULYS permet d'ajuster hauteur et rétroversion tout en assurant un parfait positionnement des tubérosités.

◆ **Vis axiale**
Permet de régler la hauteur



◆ **Vis latérale**
Permet de régler la rétroversion

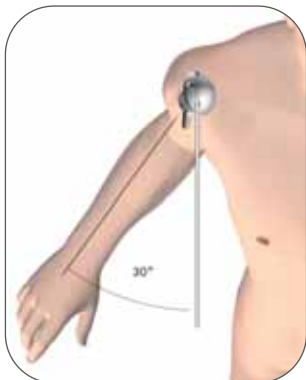


◆ **Tête d'essai**

◆ **Tige de rétroversion**

◆ **Cône**
Permet de stabiliser l'endo-ancillaire

◆ **Tige d'essai**

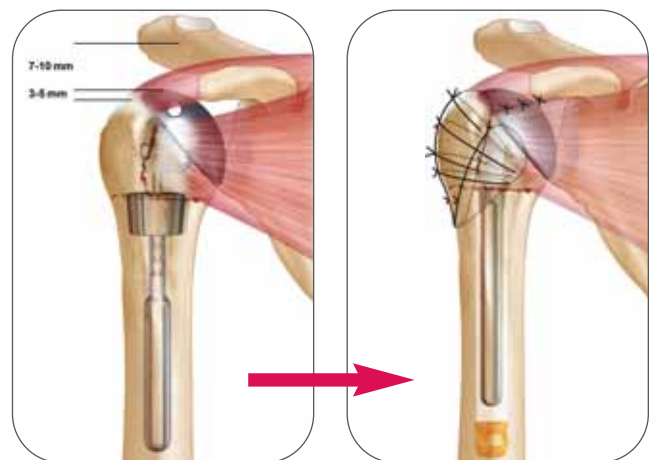

La stabilité et le très faible encombrement de l'endo-ancillaire facilitent le contrôle des réglages effectués.

> **Résultat :**
une prothèse parfaitement positionnée

LA PROTHÈSE D'ÉPAULE POUR FRACTURE

LES IMPLANTS > RÉFÉRENCES

Taille tête	Diamètre tige (mm)	Longueur tige (mm)	Référence
T1	6	125	7410
T1	8	125	7411
T1	10	125	7412
T2	8	125	7420
T2	8	200	7421
T2	10	125	7422
T2	12	125	7423
T3	8	125	7430
T3	10	125	7431
T3	12	125	7432
T3	14	125	7433



LA GAMME

Tête \ Tige	Ø 6 mm	Ø 8 mm	Ø 10 mm	Ø 12 mm	Ø 14 mm
T1	✓	✓	✓		
T2		✓	✓	✓	
T3		✓	✓	✓	✓



PARIS NORD 2 - 69, RUE DE LA BELLE ÉTOILE - B.P. 54263 GONESSE
95957 ROISSY CDG CEDEX - FRANCE
TEL. : (+33) 1 48 63 88 63 - FAX : (+33) 1 48 63 88 99
WWW.CERAVER.COM - CONTACT@CERAVER.FR

CERAVER OSTEAL AMERICA INC.
2277 GUENETTE
SAINT LAURENT QUEBEC
H4R 2E9 CANADA
TEL : 19 1 514 856 24 35
FAX : 19 1 514 856 24 44

CERAVER DEUTSCHLAND
THEODOR HEUSS STRASSE 52
61118 BAD VILBEL
ALLEMAGNE
TEL : 00 49 6101 829844
FAX : 00 49 6101 829846

CERAVER IBERICA
BELTRAN BAGUENA 5-10°-10A
NUEVO CENTRO - 46009 VALENCIA
ESPAGNE
TEL : 00 34 9 6 348 10 19
FAX : 00 34 9 6 348 10 02

CERAVER ITALIA
VIA DELL'INDUSTRIA, 2 - BARGELLINO
40012 CALDERARA DI RENO
BOLOGNA - ITALIE
TEL : 00 39 051 72 88 76
FAX : 00 39 051 72 78 03